

THE NEW VALUE FRONTIER



Web版

Ver.1.0

インプラント外科用器具

プロダクトカタログ

インプラント外科用器具

プロダクトカタログ


インプラント外科用器具／メンテナンス	1~3
BOSTOME	4~6
BOS Trephine Kit	7~8
BOS Bone Spreader	9~10
BOS Bone Pick	11~12

インプラント外科用器具／メンテナンス

KM マスターコースキット

製造販売元：株式会社 YDM

●インプラント治療に用いる外科用ツールです。

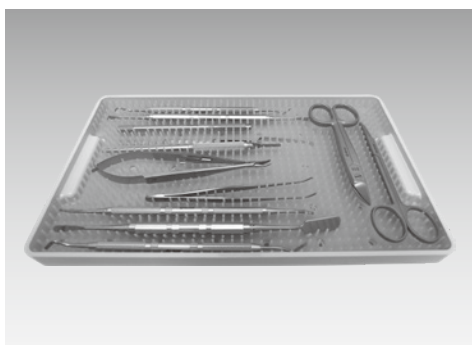

製品名	商品No.
KMニードルホルダー カストロビージョ(C)	CDR00801
KMゴールドマンフォックス シザーズ	CDR00802
KMクラウンシザーズ(C)	CDR00803
KMペリオスチール #1	CDR00804
KMペリオスチール #2	CDR00805
KMチゼルオッセンバイン	CDR00806
KM練成充填器	CDR00807
KMエキスカベーター	CDR00808
KMティッシュプライヤー(有鉤)	CDR00809
KM替刃メスハンドル	CDR00810
KMマイクロミラーセット	CDR00811
KMインスツルメントケース	CDR00812

製品名	商品No.
KMマスターコースキット	CDR00800

セット内容：各商品1点(KM替刃メスハンドルのみ2点)



KM ニードルホルダー カストロビージョ(C)



KM ゴールドマンフォックス シザーズ



KM クラウンシザーズ(C)



KM ペリオスチール #1



KM ペリオスチール #2



KM チゼルオッセンバイン



KM 練成充填器



KM エキスカベーター




KM ティッシュプライヤー(有鉤)



KM 替刃メスハンドル



KM マイクロミラーセット
(KM マイクロハンドル、ミラー 4 種類)

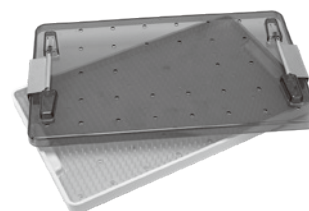

KM インスツルメントケース

ツール

● GBR テクニックに用いるツールです。

製造販売元：株式会社 YDM

製品名	商品No.
KMデプスメジャー	CDR00813
KMボーンキャリア#29	CDR00814
KMボーンキャリア#34	CDR00815
ペリオスチール#3	CDR00816
オルバンメス	CDR00817
KMニードルホルダースウェーデンタイプ(S)	CDR00818

製造販売元：株式会社 ナカニシ

製品名	商品No.
ソケットリフト ハンドインストルメント	ADC00024

製造販売元：中村デンタル 株式会社

製品名	商品No.
ボーンパイプレーター スターターキット	CDM20220

セット内容：ボーンパイプレーター、ボーンコンデンサー、ボーンエレバーター



KM デプスメジャー



KM ボーンキャリア# 29



KM ボーンキャリア# 34



ペリオスチール# 3



オルバンメス




KM ニードルホルダースウェーデンタイプ (S)



ソケットリフト ハンドインストルメント



ボーンパイプレーター

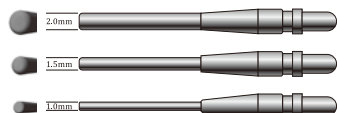

ボーンコンデンサー




ボーンエレバーター

チタンバー CA ラウンド

製造販売元：株式会社 デンテック

●外科用ハンドピースに装着し、穿孔の起始点・穿孔方向の決定や骨頂の整形などに用います。

(単位：mm)

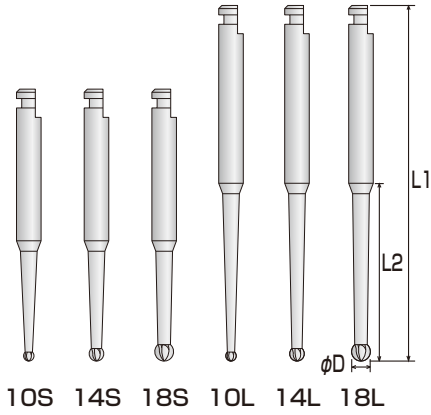

製品名	商品No.	ΦD	L1	L2
チタンバー CAラウンド10S	CDI06500	1.0	26.0	11.5
チタンバー CAラウンド14S	CDI06502	1.4		
チタンバー CAラウンド18S	CDI06504	1.8		
チタンバー CAラウンド10L	CDI06501	1.0	34.0	17.0
チタンバー CAラウンド14L	CDI06503	1.4		
チタンバー CAラウンド18L	CDI06505	1.8		

梱包形態…6本入(同一サイズ)
希望小売価格…19,800円

製品名	商品No.
チタンバー CAラウンドアソート	CDI06506

セット内容：チタンバー CAラウンド10S/14S/18S/10L/14L/18Lの6本組

チタンブラシ

製造販売元：株式会社 YDM


●補綴物等の清掃・研磨などに使用します。



KM64 チタンブラシ CONE

製品名	商品No.
KM64チタンブラシ CONE	CDI08000
KM64チタンブラシ FLAT	CDI08001

梱包形態…3本入

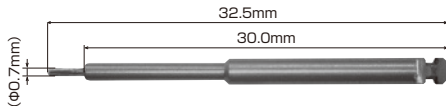

KM64 チタンブラシ FLAT

Osteotome

製造販売元：京セラ株式会社

●歯槽骨頂部から上顎洞底までの垂直的な骨の厚みが薄い場合に行う、上顎洞底挙上術（ソケットリフト）に用います。




ストレート・タイプ



カーブド・タイプ

製品名	商品No.
BOSオステオーム2-16S	CDR00150
BOSオステオーム2-22S	CDR00160
BOSオステオーム2-28S	CDR00170
BOSオステオーム2-33S	CDR00180
BOSオステオーム2-40S	CDR00182
BOSオステオーム2-43S	CDR00184


製品名	商品No.
BOSオステオーム2-16C	CDR00250
BOSオステオーム2-22C	CDR00260
BOSオステオーム2-28C	CDR00270
BOSオステオーム2-33C	CDR00280
BOSオステオーム2-40C	CDR00282
BOSオステオーム2-43C	CDR00284

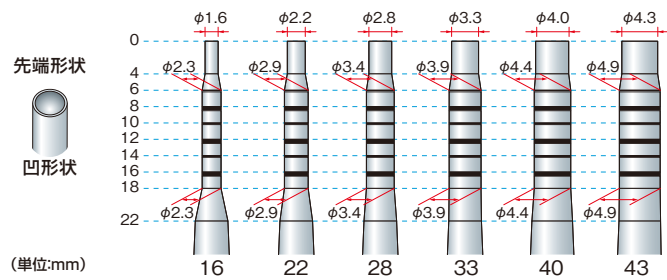

Ridge Expander

製造販売元：京セラ株式会社

●主に前歯部等で骨幅が唇、頬舌的に少ない場合、骨幅の拡幅を行う際に用います。

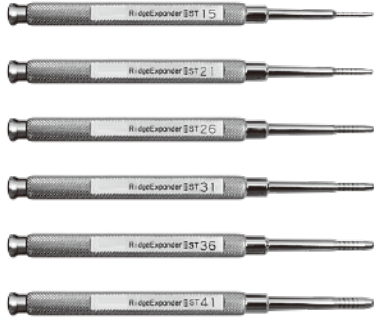


ストレート・タイプ



カーブド・タイプ

製品名	商品No.
BOSリッジエキスパンダ2-15S	CDR00050
BOSリッジエキスパンダ2-21S	CDR00060
BOSリッジエキスパンダ2-26S	CDR00070
BOSリッジエキスパンダ2-31S	CDR00080
BOSリッジエキスパンダ2-36S	CDR00090
BOSリッジエキスパンダ2-41S	CDR00100

製品名	商品No.
BOSリッジエキスパンダ2-15C	CDR00350
BOSリッジエキスパンダ2-21C	CDR00360
BOSリッジエキスパンダ2-26C	CDR00370
BOSリッジエキスパンダ2-31C	CDR00380
BOSリッジエキスパンダ2-36C	CDR00390
BOSリッジエキスパンダ2-41C	CDR00400

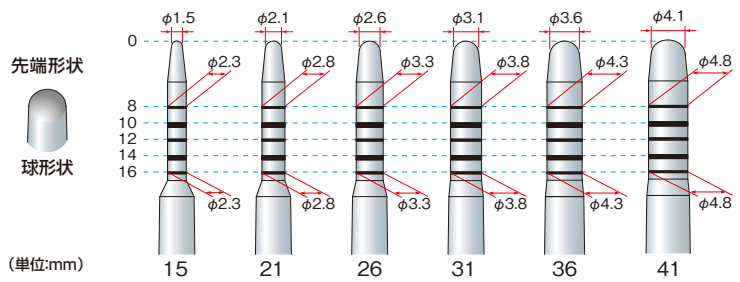

Osteotome-G (BOSTOME-G)


製造販売元：京セラ株式会社

●歯槽骨頂部から上顎洞底までの垂直的な骨の厚みが薄い場合に行う、上顎洞底挙上術（ソケットリフト）に用います。



製品名	商品No.
BOSオステオームG-32C	CDR00188
BOSオステオームG-37C	CDR00190
BOSオステオームG-42C	CDR00192
BOSオステオームG-47C	CDR00194
★BOSオステオームG-52C	CDR00196

★受注生産品となります。

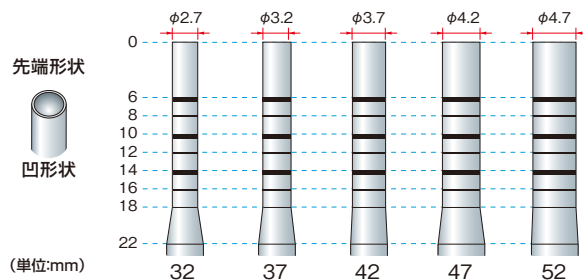

Ridge Expander-G (BOSTOME-G)


製造販売元：京セラ株式会社

●主に前歯部等で骨幅が唇、頬舌的に少ない場合、骨幅の拡幅を行う際に用います。




製品名	商品No.
BOSリッジエキスパンダG-27C	CDR00540
BOSリッジエキスパンダG-32C	CDR00550
BOSリッジエキスパンダG-37C	CDR00560
BOSリッジエキスパンダG-42C	CDR00570
BOSリッジエキスパンダG-47C	CDR00580
★BOSリッジエキスパンダG-52C	CDR00590

★受注生産品となります。

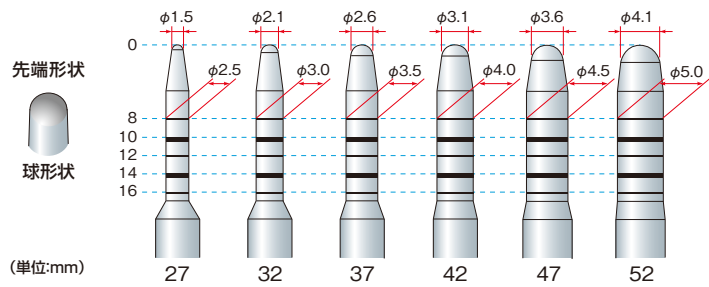

Bostome-IXY

製造販売元：株式会社 デンテック

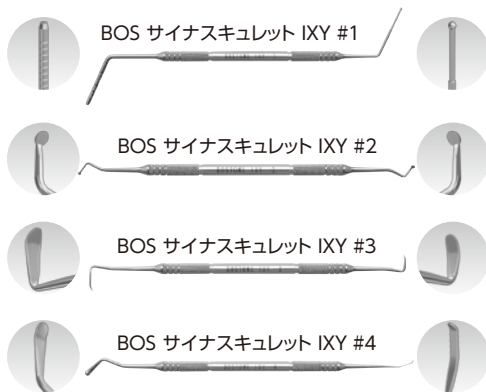


製品名	商品No.
BOS サイナスキュレット IXY #1	CDR00610
BOS サイナスキュレット IXY #2	CDR00620
BOS サイナスキュレット IXY #3	CDR00630
BOS サイナスキュレット IXY #4	CDR00640

BOS Trephine Kit

BOS Trephine Kit


製造販売元：京セラ株式会社

●骨採取やフィクスチャー抜去、インプラント窩形成に用います。

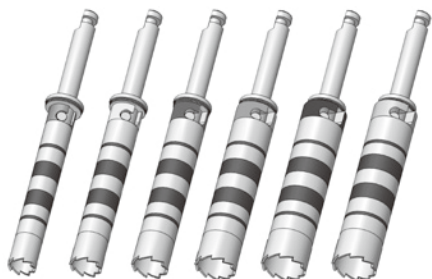

製品名	商品No.
アダプタドライバー	CDI06550
ボーンプッシャー	CDI06555
マーキングシャフト	CDI06560
ストッパーシャフト#16	CDI06565
ストッパーシャフト#14	CDI06570
ストッパーシャフト#12	CDI06575
ストッパーシャフト#10	CDI06580
ストッパーシャフト#8	CDI06585
ストッパーシャフト#6	CDI06588
BOSTレフィンバー#1	CDI06590
BOSTレフィンバー#2	CDI06595
BOSTレフィンバー#3	CDI06600
BOSTレフィンバー#4	CDI06605
BOSTレフィンバー#5	CDI06610
BOSTレフィンバー#6	CDI06615

System Configuration

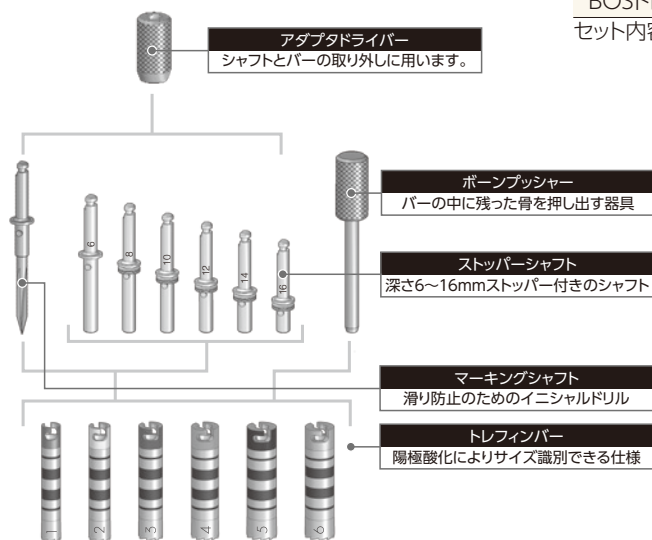


製品名	商品No.
BOSTレフィンバーキット	CDI06625

セット内容：アダプタドライバー、ボーンプッシャー、マーキングシャフト、ストッパーシャフト #16、BOSTレフィンバー #3/#4/#5/#6

Trephine Size

	Tr#1	Tr#2	Tr#3	Tr#4	Tr#5	Tr#6
Inner	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.3
Outer	3.3	3.8	4.3	4.8	5.3	5.8
Color	Brown	Yellow	Pink	Green	Blue	Gold


マーキングシャフト、ストッパーシャフトについて、お使いのマイクロモーターのコントラヘッド【ヘッド内寸法】が12mm以上ある場合は下記Lサイズをご使用ください。

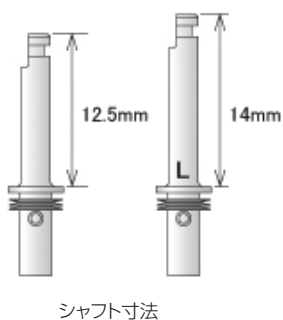

製品名	商品No.
マーキングシャフトL	CDI06561
ストッパーシャフト#16L	CDI06566
ストッパーシャフト#14L	CDI06571
ストッパーシャフト#12L	CDI06576
ストッパーシャフト#10L	CDI06581
ストッパーシャフト#8L	CDI06586
ストッパーシャフト#6L	CDI06589

■ Surgical Procedure

トレフィンバー#3 / ストッパーシャフト#12の使用例

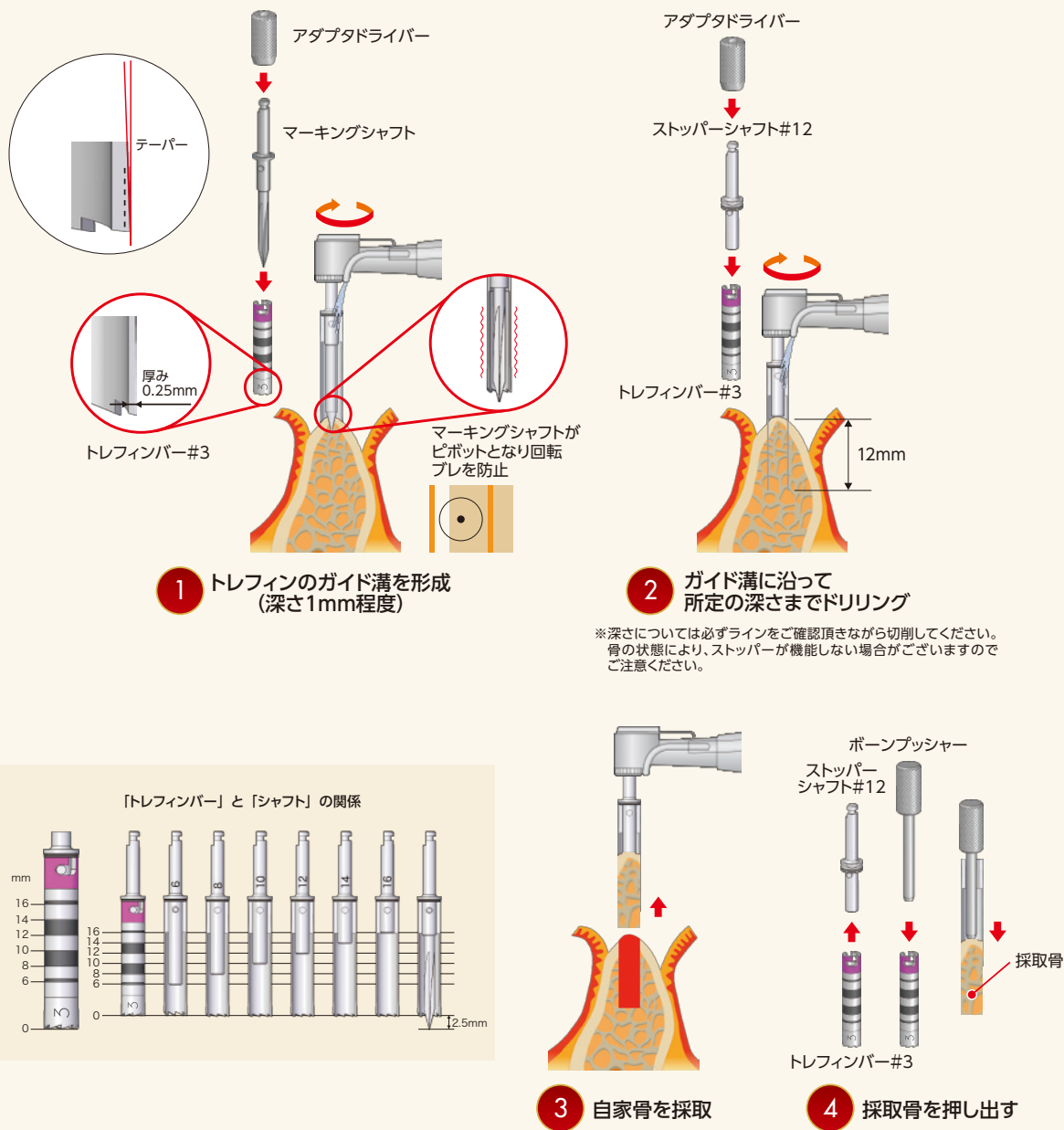

BOS Trephine Case

製造販売元：京セラ株式会社



製品名	商品No.
BOSトレフィンケース	CDI06620


・掲載価格はケース本体のもので、収納されている器具の価格は含まれておりません。

BOS Bone Spreader

BOS Bone Spreader

製造販売元：京セラ株式会社

●少ない衝撃で骨を押し広げながら「脆弱骨の緻密化」・「骨幅の拡幅」を行う際に用います。

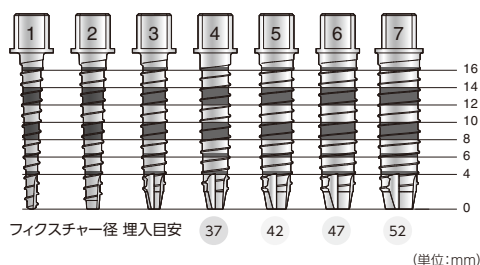

製品名	商品No.
BOSボーンスプレッダー#1	CDR00651
BOSボーンスプレッダー#2	CDR00652
BOSボーンスプレッダー#3	CDR00653
BOSボーンスプレッダー#4	CDR00654
BOSボーンスプレッダー#5	CDR00655
BOSボーンスプレッダー#6	CDR00656
BOSボーンスプレッダー#7	CDR00657

製品名	商品No.
BOSボーンスプレッダーセット	CDR00650

セット内容：BOSボーンスプレッダー#1/#2/#3/#4/#5の5本組


φ Size (Head & Body)

(単位:mm)

	骨内長	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
φ (head)	—	1.1	1.4	1.3	1.8	2.2	2.7	3.1
φ (body)	8	2.1	2.5					
	10	2.2	2.6					
	12	2.3	2.8	3.1	3.5	4.0	4.4	4.9
	14	2.5	2.9					
	16	2.6	3.1					

BOS Spreader Case

製造販売元：京セラ株式会社

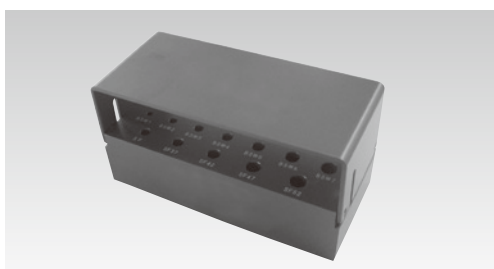


製品名	商品No.
BOSスプレッダーケース	CDR00658



■ Surgical Procedure

目安の回転数: 1分間800rpm


1 Marking Bur

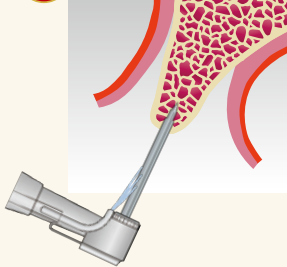

2 Drill Contra #16

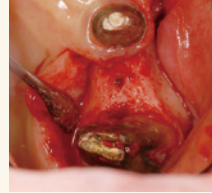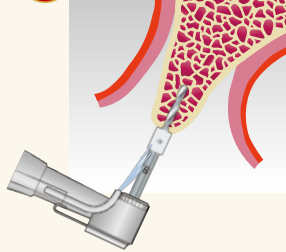


3 Trial Pin

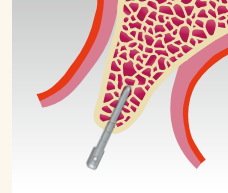


目安の回転数: 1分間20rpm

4 Bone Spreader #1

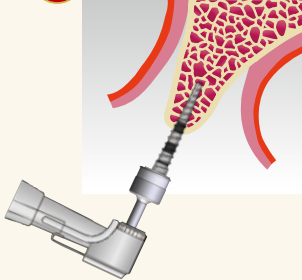


5 Bone Spreader #2

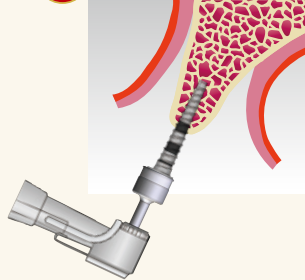


#3以降、トルクレンチにて拡大


6 Bone Spreader #3

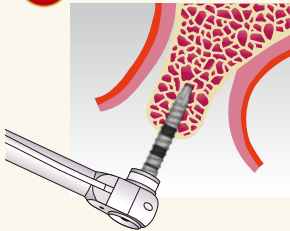


7 Bone Spreader #4

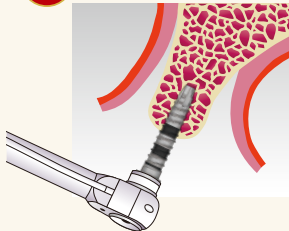

8 Screw Former TP 37*

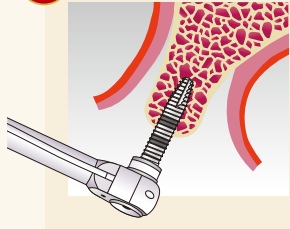

9 POI 37-10TP-S

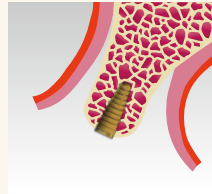

*脆弱骨症例以外、通常の骨質・硬い骨質においては使用


Provided by Dr.Tetsuji Takahashi

BOS Bone Pick

BOS Bone Pick


製造販売元：京セラ株式会社

● Bone Spreader にて対応が困難な骨幅が狭いケースに適用

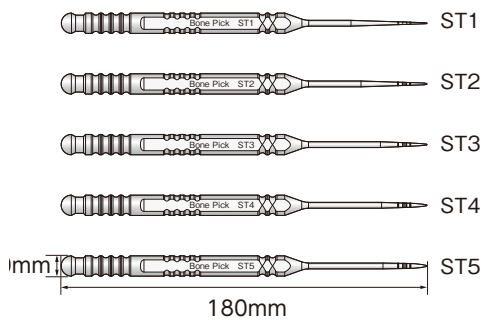

ストレート・タイプ

製品名	商品No.
BOS ボーンピック ST1	CDR00720
BOS ボーンピック ST2	CDR00721
BOS ボーンピック ST3	CDR00722
BOS ボーンピック ST4	CDR00723
BOS ボーンピック ST5	CDR00724

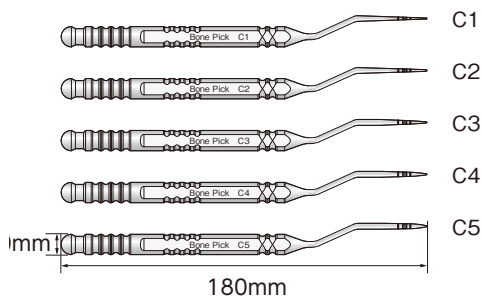


カーブド・タイプ

製品名	商品No.
BOS ボーンピック C1	CDR00725
BOS ボーンピック C2	CDR00726
BOS ボーンピック C3	CDR00727
BOS ボーンピック C4	CDR00728
BOS ボーンピック C5	CDR00729

先端サイズ

(単位：mm)

骨内長	ST1/C1	ST2/C2	ST3/C3	ST4/C4	ST5/C5
8	1.00	1.32	1.60	2.00	2.40
10	1.13	1.45	1.77	2.12	2.47
12	1.26	1.58	1.95	2.25	2.55
14	1.39	1.71	2.12	2.37	2.62

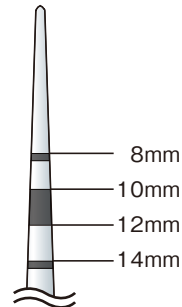


■ Surgical Procedure

例：37-TPの場合

ステップ1：皮質骨穿孔

〔バリオサージチップ：
SG15A or SG15C推奨〕

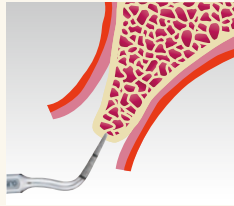


ステップ2：皮質骨拡大

Bone Pick#1～5を用いて、
順次拡大




ステップ3：骨幅拡大

Bone Spreader#1～4を用いて、
順次拡大

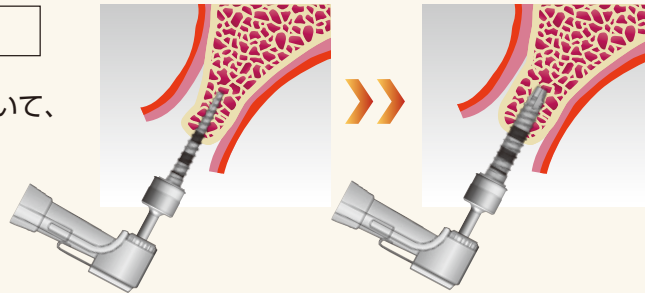


ステップ4：タップ形成

Screw Former

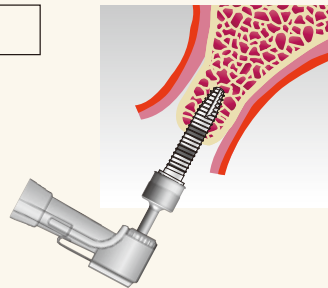

ステップ5：埋入

フィクスチャー埋入

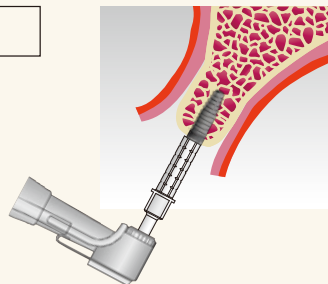

KM ニードルホルダーカストロビージョ (C)	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000630D017】	KM オルバンメス	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000634D104】
KM ゴールドマンフォックスシザーズ	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000635D204】	KM ニードルホルダースウェーデンパターン	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000630D019】
KM クラウンシザーズ (C)	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000635D102】	チタンバー CA ラウンド	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 13B2X00094000137】
KM ペリオスチール	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000642D031】	KM64 チタンブラシ	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000609D001】
KM チゼルオッセンバイン	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000641D008】	BOS 外科手術用器具	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 27B1X00139103101】
KM 練成充填器	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000665D622】	BOS サイナスキュレット IXY	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 13B2X00094000003】
KM エキスカペーター	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000662D310】	BOS トレフィンキット	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 27B1X00139104106】
KM ティッシュプライヤー (有鉤)	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000636D022】	BOS ボーンスプレッダー	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 27B1X00139101106】
KM 替刃メスハンドル	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000634D009】	ソケットリフト ハンドインストルメント	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 09B2X00016000141】
KM マイクロミラーセット	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000625D016】	ストリップングコントラアングル	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 225ALBZX00008000】
KM デプスメジャー	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000658D124】	ボーンコンデンサー	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 13B2X00108000013】
KM ボーンキャリア	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000658D125】	ボーンエレベーター	【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 13B2X00108000014】



京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501

Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 1-Sビル 〒140-8810
Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004
Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

ver.1.0