


セメントレスタイプ

セメントッドタイプ


PROARC

- 日本人肘関節の形態計測にもとづきデザインし、理想的なアライメントの再建が行えるよう、左右別のデザインとしました。
- 摺動部は非制御型で、材質は摩耗特性に優れたアルミナ・セラミックスとUHMWPEの組み合わせです。
- 症例に応じてセメントッドタイプとセメントレスタイプが選択できます。

JACE *Alumina ceramic* Elbow

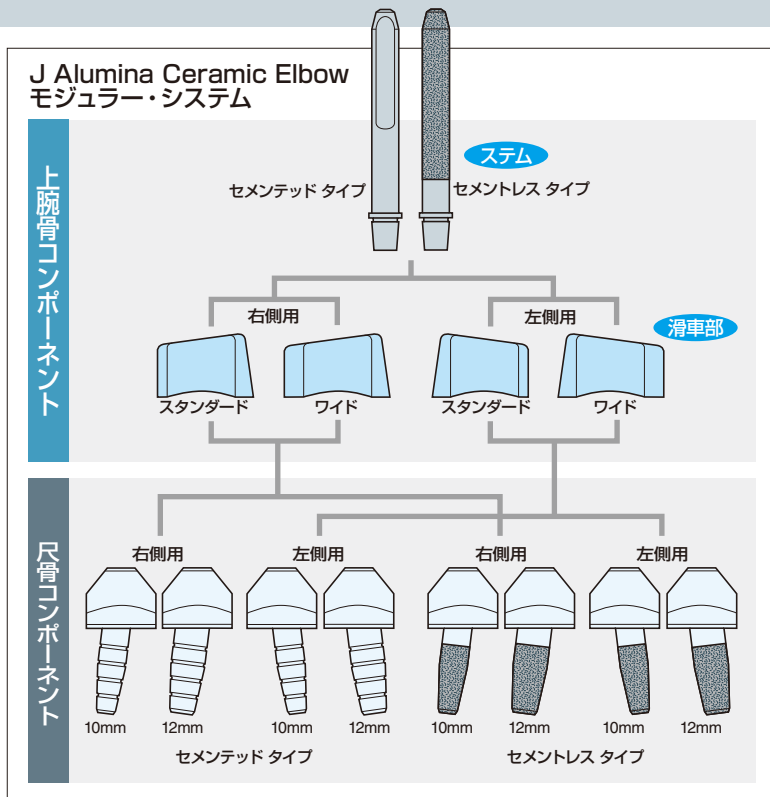

上腕骨コンポーネントと尺骨コンポーネントはモジュラー・システムです。両コンポーネントのサイズの組み合わせには、制限がありません。

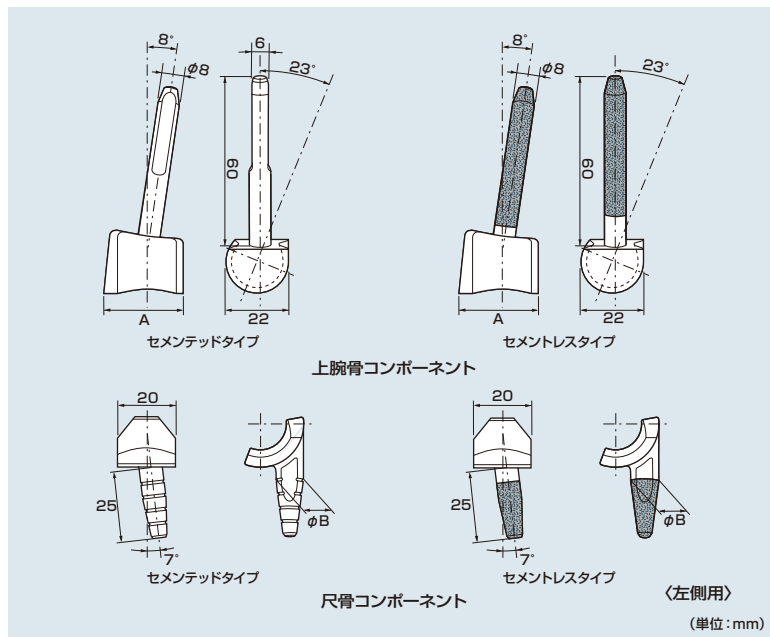

上腕骨コンポーネント

- 日本人肘関節の標準的形態に適合するよう、ステムは滑車部に対し8度で組み合わされます。
- 上腕骨コンポーネントのステムはチタン合金製、滑車部はアルミナセラミックス製です。
- ステムと滑車部の固定は、人工股関節のボールとステムで実績のあるテーパー嵌合方式です。術中、ステムを滑車部に打ち込み使用します。
- セメントレスタイプのステムの表面は、京セラが開発したイナートガス・シールドアーク溶射法による、内部欠陥の少ない純チタンの粗面皮膜 (PROARC) を形成しています。

ステム

タイプ	商品No.	品名
セメントッド	CMJ01390	JACE-ELBOW(H)Cステム-8
セメントレス	CMJ01300	JACE-ELBOW(H)ステム-8

滑車部

タイプ	サイズ	商品No.	品名	A
右側用	スタンダード	CMJ01310	JACE-ELBOW(H)RT-STD	28
	ワイド	CMJ01320	JACE-ELBOW(H)RT-WIDE	31
左側用	スタンダード	CMJ01330	JACE-ELBOW(H)LT-STD	28
	ワイド	CMJ01340	JACE-ELBOW(H)LT-WIDE	31

尺骨コンポーネント

- ステムは、摺動部に対して7度に設定されており、尺骨長軸方向に挿入されます。
- セメントッドタイプは摺動部、ステムともにUHMWPE製であり、セメントレスタイプのステムは上腕骨コンポーネント同様、チタン合金の母材にPROARCを施しています。

タイプ	ステムサイズ	商品No.	品名	B	
セメントッド	右側用	10mm	CMJ01391	JACE-ELBOW(U)PE-R10G	10
	右側用	12mm	CMJ01392	JACE-ELBOW(U)PE-R12G	12
	左側用	10mm	CMJ01393	JACE-ELBOW(U)PE-L10G	10
	左側用	12mm	CMJ01394	JACE-ELBOW(U)PE-L12G	12
セメントレス	右側用	10mm	CMJ01350	JACE-ELBOW(U)RT-10	10
	右側用	12mm	CMJ01360	JACE-ELBOW(U)RT-12	12
	左側用	10mm	CMJ01370	JACE-ELBOW(U)LT-10	10
	左側用	12mm	CMJ01380	JACE-ELBOW(U)LT-12	12

人工肘関節 [医療機器承認番号:20900BZZ00649000]
人工肘関節尺骨コンポーネントPE [医療機器承認番号:21500BZZ00500000]

当パンフレットに記載の情報は2021年12月時点のものです。
当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。



京セラ株式会社 メディカル事業部 本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 1・Sビル 〒140-8810 Tel:03-5782-7006 Fax:03-5782-8515
大阪事業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003 Tel:06-6350-1017 Fax:06-6350-8157

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001 Tel:011-280-6020 Fax:011-281-6525 岡山営業所 岡山市北区東陽町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826 Tel:086-803-3620 Fax:086-225-2289
東北営業所 仙台市青葉区中央3丁目2-1(青葉通プラザビル6F) 〒980-0021 Tel:022-216-5176 Fax:022-216-7116 広島営業所 広島市南区京橋町1-7(アスティ広島京橋ビルディング11F) 〒732-0828 Tel:082-568-8538 Fax:082-568-8539
大宮第2営業所 さいたま市大宮区桜木町1-11-9(ニッセイ大宮桜木町ビル3F) 〒330-0854 Tel:048-640-7779 Fax:048-641-5828 九州営業所 福岡市博多区博多駅前2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013 Tel:092-452-8140 Fax:092-452-8177
名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004 Tel:052-930-1481 Fax:052-938-1377



※このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。
■禁無断転載、複製