




INHERITOR®

INHERITOR[®]

INHERITORは、
Tapered Rectangle型⁽¹⁾⁽²⁾のステムです。


Surface Roughness

ステムの表面粗さは、Ra 4~8 μ m
です。

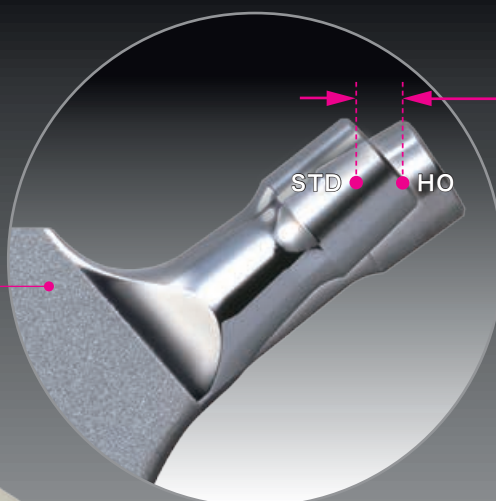

5.5mm オフセット

STD、HOの違いによらず骨切り面以下
はサイズごとに同形状です。
HOはSTDより水平方向に5.5mm延長
しています。

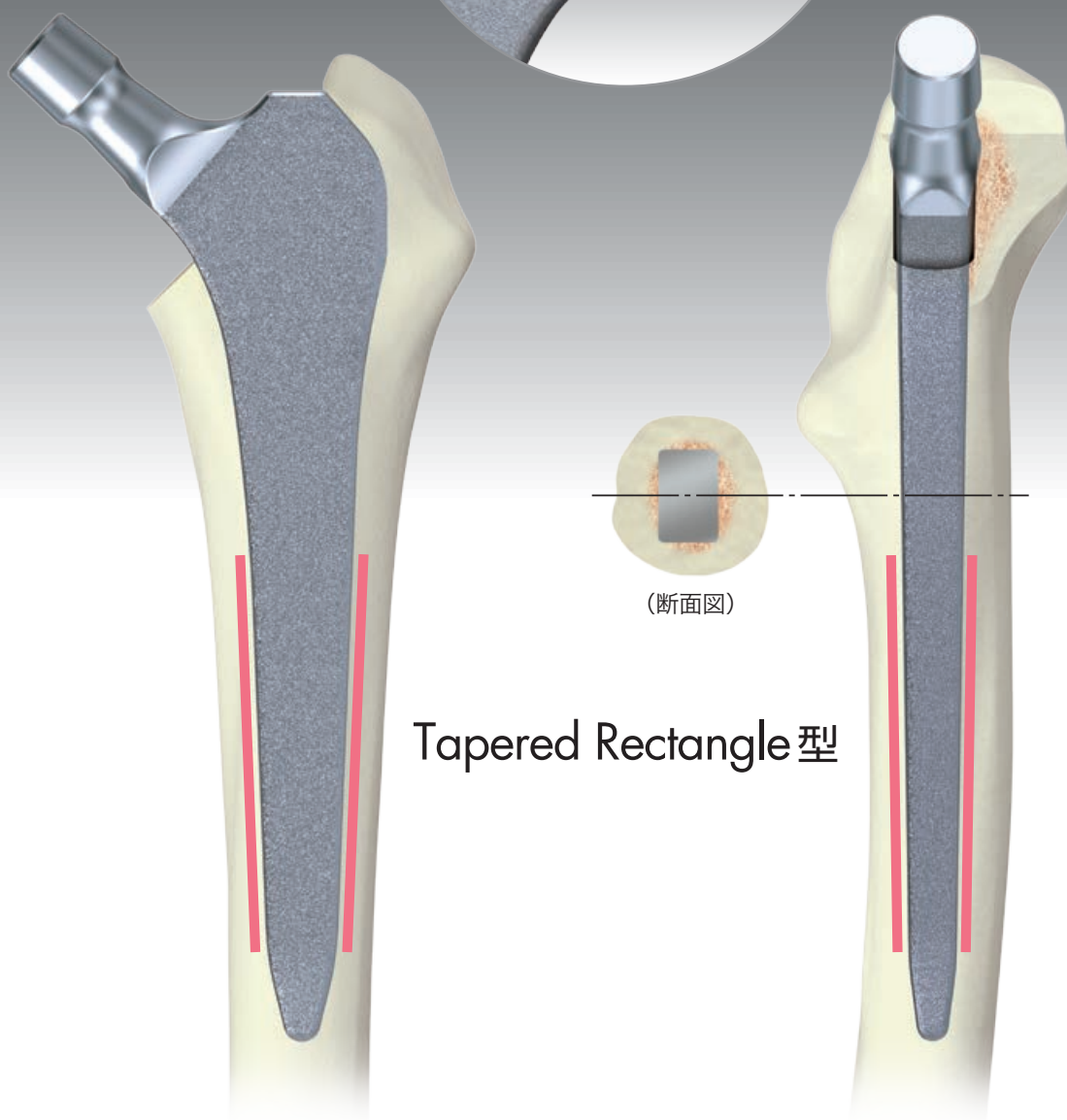


Tapered Rectangle 型

(1) 参考文献：近藤宰司 他, Bone Joint Nerve, Vol.7, No.1, 103-114 (2017)

近藤らは、代表的なTapered Rectangle型ステムであるZweymüllerステムで経験した
術後20年以上経過した85例92関節について報告しています。

(2) 参考文献：Khanuja et al., J. Bone Joint Surg. Am., 93,500-509(2011)

Khanujaらは、セメントレス人工股関節をステムデザインと初期固定部位によって6つに分類し、
それぞれの臨床成績について報告しています。その一つにTapered Rectangle型が含まれます。

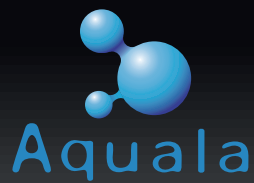

SCRUM[®] TT



BIOCERAM AZUL


DUALCUP

※写真はイメージです

BIOCERAM AZUL


高純度アルミナとジルコニアの
長所を兼ね備えたセラミックス骨頭ボール

BIOCERAM AZUL (バイオセラム アズール) は高純度アルミナに約20%のジルコニアを配合した人工関節の摺動面用のセラミックス材料です。

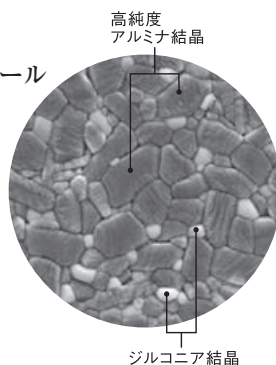

ポリエチレンの特性はそのままに、摺動面を低摩耗化

MPCにより処理 (Aquala) された摺動面は、親水性が付与されるため、水の薄膜層が形成されることになり、高い潤滑性が得られます。その結果、耐摩耗性が向上することが、試験データにおいても確認されていることから、臨床においてもポリエチレン摩耗の低減が期待できます。※MPC(2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine)

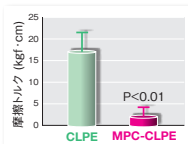

(アクアラライナー in vitro テスト)

潤滑性の比較

表面の摩擦特性を評価すると、摩擦トルクはAquala処理されたCLPE(MPC-CLPE)では、従来のクロスリンクポリエチレンに対して、80~90%低減していることが確認されました。


SCRUM[®] TT

電子ビーム積層造形法を採用

素材粉末を層状に敷き詰め、高出力のレーザービームで直接焼結して造形を行う製造法を採用しました。カップ母材だけでなく、骨梁のような3Dポラス構造も一体的に形成することができます。

3Dポラスを搭載

- ・チタン合金素材
- ・強固なスクラッチフィット
- ・積層造形法一体成形
→ポラス部の剥離を回避

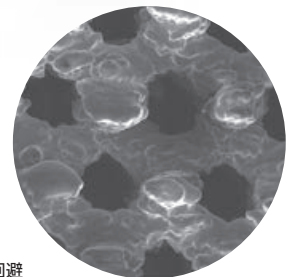

平均気孔径640μmの立体構造

DUALCUP

耐摩耗性に優れたクロスリンクPEを採用


ライナーには耐摩耗性に優れたクロスリンクポリエチレン(エクセルリンク)を採用しています。ワンタッチで装着が可能です。



ワンタッチ固定式

INHERITOR ステム

STD(スタンダード)

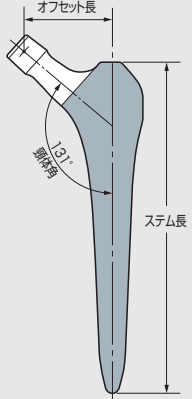


※

商品No.	商品名	サイズ	ステム長	オフセット長
AMH09-500071	INHERITOR STD #01	01	126.0	32.8
AMH09-500072	INHERITOR STD #0	0	130.2	33.9
AMH09-500073	INHERITOR STD #1	1	134.6	35.0
AMH09-500074	INHERITOR STD #2	2	139.0	36.0
AMH09-500075	INHERITOR STD #3	3	143.8	37.2
AMH09-500076	INHERITOR STD #4	4	148.6	38.4
AMH09-500077	INHERITOR STD #5	5	153.6	39.6
AMH09-500078	INHERITOR STD #6	6	158.1	40.1
AMH09-500079	INHERITOR STD #7	7	162.8	40.8
※ AMH09-500080	INHERITOR STD #8	8	167.6	41.3
※ AMH09-500081	INHERITOR STD #9	9	172.6	41.9

12/14ボールと組み合わせて使用してください。
上記※付けたサイズはオプション品のため別途お問い合わせください。
材質はチタン合金 (Ti-6Al-4V) です。

HO(ハイトフセット)

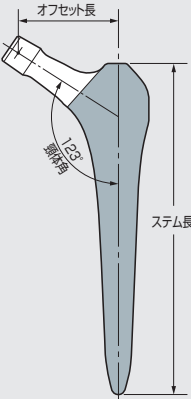

※

商品No.	商品名	サイズ	ステム長	オフセット長
AMH09-500082	INHERITOR HO #01	01	126.0	38.3
AMH09-500083	INHERITOR HO #0	0	130.2	39.4
AMH09-500084	INHERITOR HO #1	1	134.6	40.5
AMH09-500085	INHERITOR HO #2	2	139.0	41.5
AMH09-500086	INHERITOR HO #3	3	143.8	42.7
AMH09-500087	INHERITOR HO #4	4	148.6	43.9
AMH09-500088	INHERITOR HO #5	5	153.6	45.1
AMH09-500089	INHERITOR HO #6	6	158.1	45.6
AMH09-500090	INHERITOR HO #7	7	162.8	46.3
※ AMH09-500091	INHERITOR HO #8	8	167.6	46.8
※ AMH09-500092	INHERITOR HO #9	9	172.6	47.4

12/14ボールと組み合わせて使用してください。
上記※付けたサイズはオプション品のため別途お問い合わせください。
材質はチタン合金 (Ti-6Al-4V) です。

骨頭ボール



12/14 AZULボール

骨頭径	商品No	商品名	ネック長(mm)
φ26mm	AMH04-400053	1214AZULボール 26:+0	+0
	AMH04-400054	1214AZULボール 26:+3.5	+3.5
φ28mm	AMH04-400056	1214AZULボール 28:-3.5	-3.5
	AMH04-400057	1214AZULボール 28:+0	+0
φ32mm	AMH04-400058	1214AZULボール 28:+3.5	+3.5
	AMH04-400061	1214AZULボール 32:-3.5	-3.5
φ36mm	AMH04-400062	1214AZULボール 32:+0	+0
	AMH04-400063	1214AZULボール 32:+3.5	+3.5
	AMH04-400064	1214AZULボール 32:+7	+7
	AMH04-400065	1214AZULボール 36:-3.5	-3.5
	AMH04-400066	1214AZULボール 36:+0	+0
	AMH04-400067	1214AZULボール 36:+3.5	+3.5
	AMH04-400068	1214AZULボール 36:+7	+7

※ 上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質はジルコニア強化アルミナ・セラミックスです。
一般的名称: 人工股関節大腿骨コンポーネント
BIOCERAM AZULヘッド [医療機器承認番号: 22600BZX00510000]

12/14 メタルボール



骨頭径	商品No	商品名	ネック長(mm)
φ22mm	AMH03-400031	12/14メタルボール 22:+0	+0
	AMH03-400032	12/14メタルボール 22:+3.5	+3.5
φ26mm	AMH03-400033	12/14メタルボール 26:-3.5	-3.5
	AMH03-400034	12/14メタルボール 26:+0	+0
φ28mm	AMH03-400035	12/14メタルボール 26:+3.5	+3.5
	AMH03-400036	12/14メタルボール 28:-3.5	-3.5
φ32mm	AMH03-400037	12/14メタルボール 28:+0	+0
	AMH03-400038	12/14メタルボール 28:+3.5	+3.5
	AMH03-400040	12/14メタルボール 32:-3.5	-3.5
	AMH03-400041	12/14メタルボール 32:+0	+0
	AMH03-400042	12/14メタルボール 32:+3.5	+3.5
	AMH03-400043	12/14メタルボール 32:+7	+7

材質はCo-Cr合金です。
一般的名称: 人工股関節大腿骨コンポーネント
12/14メタルボール [医療機器承認番号: 22500BZX00200000]

デュアルカップCLDCS(φ26mm骨頭用)



骨頭径(mm)	商品No	商品名(内径-外径)
40	SCLDC2640	DUALCUP 26-40
41	SCLDC2641	DUALCUP 26-41
42	SCLDC2642	DUALCUP 26-42
43	SCLDC2643	DUALCUP 26-43
44	SCLDC2644	DUALCUP 26-44
45	SCLDC2645	DUALCUP 26-45
46	SCLDC2646	DUALCUP 26-46
47	SCLDC2647	DUALCUP 26-47
48	SCLDC2648	DUALCUP 26-48
49	SCLDC2649	DUALCUP 26-49
50	SCLDC2650	DUALCUP 26-50
51	SCLDC2651	DUALCUP 26-51
52	SCLDC2652	DUALCUP 26-52
53	SCLDC2653	DUALCUP 26-53
54	SCLDC2654	DUALCUP 26-54

※ 上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質は「アウターカップ:Co-Cr-Mo合金」、「インナーカップ:Excellink UHMWPE」です。
一般的名称: 人工骨頭
デュアルカップ CLDCS [医療機器承認番号: 22600BZX00246000]



京セラメディカル株式会社

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
https://www.kyocera-medical.co.jp

2025年10月時点の情報です。
「BIOCERAM AZUL」「SQRUM」「Aquala」「Excellink」
「INHERITOR」は京セラメディカル株式会社の登録商標です。
掲載情報を無断で複製、転載することを禁じます。

BCZT40400
250922M [M-110-9] 00016
© 2025 KYOCERA Medical Corporation

製品に関する詳細な情報や領域ごとの最新情報など、会員限定のコンテンツが
閲覧できます。また、会員登録が完了してなくてもカタログなどの一部の情報
は、「医師」「看護師」「その他医療従事者」から閲覧できます。
詳しくはこちら ▶

